

小型軽量電動カート

GO GO  
ELITE TRAVELLER PLUS

# ゴーゴー

お買い物、通院や旅行先での移動にも



Pride  
Mobility Products Corp.

¥320,000 (非課税)

コンパクトで簡単分解。

レッド、ブルー、シルバー 今日は何の色？

素早く簡単に4つのパーツに分解可能です。一番重い部分でも、約16kgととっても軽量。場所をとらず、持ち運びが楽々です。バッテリーパックは持ち上げるだけで取り外せますので室内での充電も可能です。旅行先でのご使用や保管場所にも困りません。乗り心地の良い調節可能シートサスペンションを搭載。

1台でレッド、ブルー、シルバー3色の外装が付いてきます。アクティブなライフスタイルにぴったり、これからの電動四輪車です。

免許不要

Alcare

## ゴーゴーの機能



持ち上げるだけで取り外せ室内での充電が出来るバッテリーパック。



1台に3色の外装が標準装備。  
その日の気分で色が変わられます。



ワンタッチリリースレバーで分解が更に簡単出来るようになりました

## ゴーゴーの分解図

最も重い前部パーツでも16kg

総重量: 52kg

※写真は三輪です。



※バッテリーの重量により総重量が異なる場合があります。

### 諸元表

* 製品名	ゴーゴー
* 全長	1010mm
* 全幅	570mm(※シート幅含む)
* 本体重量	52kg (バッテリー含む)
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	シールド12V 17AH×2
* 充電器	オフボード
* 車輪・前輪	2"(51mm)×8"(203mm)
* 車輪・後輪	3"(76mm)×9"(229mm)
* タイヤ型式	ノンパンク標準
* 駆動方式	後二輪直接駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ
* 操舵方式	ハンドルによる前輪操舵式
* 制御方式	アクセルレバーによる無段階電子制御方式
* シート構造	前後位置・高さ調整式 左右90°回転シート、肘掛跳ね上げ式
* シート寸法	430×406×34.25mm(幅×奥行×バックレスト高)
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	21km
* 最小回転半径	1160mm
* 床から本体最低部	76mm
* 段差乗越高さ	40mm
* 最大積載量	147kg


※仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高さ、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のもので、※連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

## その他機能

- ☆ シートの高さが4段階に調節可能
- ☆ 乗心地の良いシートサスペンション搭載
- ☆ 折りたたみ可能なクッションシート
- ☆ 左右側面に2つずつある反射板で  
ドライバーから認識しやすくなりました
- ☆ シートが回転するので乗降りが楽々
- ☆ ハンドル角度を無段階に調節可
- ☆ ノンパンクタイヤ、フロントバスケット
- ☆ シンプルで扱いやすい操作パネル

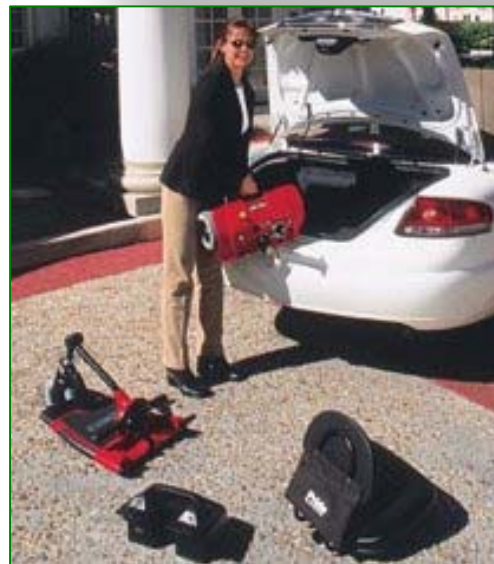

お問い合わせは・・・

 **株式会社アルケアコーポレーション**  
Pride社日本国内総代理店

介護保険事業所番号: 1272203975

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: [mail@alcarecorp.co.jp](mailto:mail@alcarecorp.co.jp)