

中輪駆動式ハイクラス電動車いす
クオントム6000Z

6000を進化させた
パワーと操作性を両立させた
ハイクラス機種



Pride
Mobility Products Corp.

スムーズでパワフルな走行性を実現する
最高位中輪駆動型電動車いす

ハンマーモーターによりパワフルな走行からは想像できない中輪駆動方式だけが実現する最小回転半径は、狭い場所での方向転換にも強力な優位性を発揮します。

路面の衝撃を吸収するアクティブ・トラックサスペンションと新開発オムニキャストターは、過酷な条件での使用の際にも快適な乗り心地を提供します。

また、直線走行を安定させる進歩したトラッキング技術「アキュートラックシステム」を標準装備。より強力なハンマーモーターをオプション選択出来ます。

Q-LOGIC 2
DRIVE CONTROL SYSTEM

Accu-Trac
Advanced Tracking Technology



QUANTUM 6000Z

クオンタム6000Zの機能

- ☆まさにその場で回転している感覚。最小回転半径57cmの小回り
- ☆直線走行を安定させる進歩し「アク્યートラック システム」搭載。
- ☆悪路や段差に強い「アクティブトラックサスペンション(ATS)」
- ☆安定した走行を実現する低重心設計
- ☆新開発オムニカスターとATSのコンビネーションがさらに機動力を發揮
- ☆トルーバランス電動オプション(ティルト、リクライニング)との相性も抜群
- ☆多機能、プログラム可能な最新Q-ロジック2コントローラー標準搭載
- ☆両サイドについて操作しやすくなった車輪開放レバー
- ☆スムーズでパワフルな加速性を持つハンマーモーター※オプション



※写真はクオンタム6000です



※写真はクオンタム6000です

カラーバリエーション



レッド ブルー シルバー オレンジ ブラック





アク્યートラック システム
直線走行を安定させる
進歩したトラッキングテクノロジー


- ◆ 最適な走行を最小限の修正操作でコントロール
- ◆ 障害物を乗り越えるための自動トルク制御
- ◆ 余分な操作を軽減する、より効率的な走行性

諸元表 ※標準仕様	
* 製品名	クオンタム6000Z
* 型式	6輪/中輪駆動
* 寸法	914(全長)×657mm(幅)
* 本体重量	67kg (シート、バッテリーは含まず)
* 駆動モーター	4-pole accu-track, オプションHAMMER-Mortor
* バッテリー	12V 70AH×2個 密閉型鉛蓄電池
* 充電器	オフボード
* 車輪 cm	15(OMNI-Caster)×35.5×15(OMNI-Caster)
* タイヤ型式	空気入り(駆動輪)、ソリッド(OMNI-Caster)
* 駆動方式	中二輪駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動
* 操舵方式	ジョイスティックによる
* 制御方式	全方向無段階電子制御方式 トルーコンフォートシート(標準)、 トルーバランス電動オプション
* シート	
* シート寸法	254~610×254~610mm(幅×奥行)
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	約32km ※シートオプション、使用環境などで異なります
* 最小回転半径	57cm
* 床から本体最低部	89mm
* 段差乗越高さ	60mm 段差の形状などにより異なります
* 最大積載量	136kg
* バッテリー重量	24kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる事があります。)

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問合せは・・・

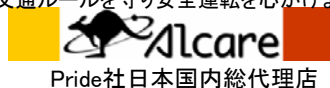

Pride社日本国内総代理店

株式会社アルケアコーポレーション

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: mail@alcarecorp.co.jp